

ATTO 60周年感謝祭 第4弾

スターターセットキャンペーン

キャンペーン期間 2024年4月17日～7月31日

スターターセットとは？

電気泳動やウエスタンブロッティングによく使用する試薬5種類をセットにして期間限定 50% OFF で提供します。



バイオの夜明け前 1960 年台初頭から、顧客研究者にご支援と激励をいただき、
おかげさまでアトー株式が社は 2024 年 1 月 28 日で創立 60 周年を迎えました。社員一同心から感謝申し上げます。



キャンペーン期間 2024年4月17日～7月31日

SDS-PAGE スターターセット

タンパク質の分離手法の1つ、SDS-PAGEではさまざまな試薬を使用します。分離パターンは濃度定量やウエスタンブロットなどに利用します。

電気泳動メーカーアトーからリリースしている信頼の電気泳動用試薬シリーズから、SDS-PAGE用の基本的な試薬5種類をセットにして**期間限定 50%オフ**で提供いたします。



商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2332301	SDS-PAGE スターターセット	34,000 円	68,000 円
構成	2332336 WSE-7420 EzRIPA Lysis Kit	12,800 円	輸送：冷凍
	2332330 AE-1430 EzApply(サンプル調製バッファー)	9,800 円	輸送：冷凍
	2332310 AE-1410 EzRun(泳動バッファー)	6,800 円	輸送：常温
	2332346 WSE-7020 EzProtein Ladder	25,800 円	輸送：冷凍
	2332370 AE-1340 EzStain AQua	12,800 円	輸送：常温

50% OFF

スターターセット構成品の輸送温度の違いにより、別便での発送となります。

スターターセットと同時購入でオススメ製品が特別価格購入可能！

オススメ同時購入特典製品


ミニスラブ電気泳動槽

AE-6530M/MW/P

ラピダスミニスラブシリーズ

同時購入価格 30,000 円～

(通常価格 52,800 円～)

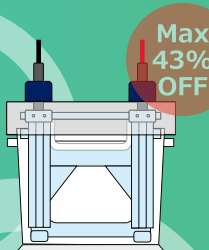


電源搭載型電気泳動装置

WSE-1150M/MW/P

パジェラン Ace シリーズ

同時購入価格 89,600 円～

(通常価格 128,000 円～)

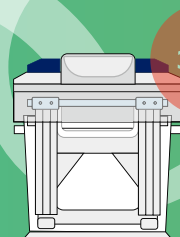

電気泳動用電源装置

AE-8135

マイパワー II 300

同時購入価格 64,960 円

(通常価格 92,800 円～)




電気泳動用電源装置

WSE-3100

PowerStation Ghibli I

同時購入価格 210,800 円

(通常価格 248,000 円～)

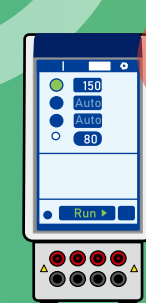

同時購入特典製品の詳細は P07 ～をご参照ください。

50% OFF

< SDS-PAGE スターターセット構成品 >

1. SDS-PAGE 用 タンパク質抽出キット

WSE-7420 EzRIPA Lysis Kit

動植物細胞や組織から全タンパク質を可溶化・抽出できます。Protease inhibitor と Phosphatase inhibitor が添付されています。

キット内容

- ① EzRIPA Lysis buffer 100 mL
- ② Protease inhibitor (100x) 1.0 mL
- ③ Phosphatase inhibitor (100x) 1.0 mL

保存 ① 4℃ / ②③ -20℃
使用期限 製造より1年



2. SDS-PAGE 用 泳動サンプル調製キット

AE-1430 EzApply


還元力の高い DTT を採用した SDS-PAGE 用泳動サンプル調製キットです。

キット内容

- EzApply 30 mL
- DTT (粉末) 5本 (5回分)

保存 -20℃ 使用期限 製造より6ヶ月

EzApply 1%ME 50mM ME 還元剤なし

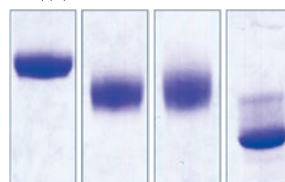

3. SDS-PAGE 用 電気泳動バッファ


AE-1410 EzRun

Laemmli 法に準拠した SDS-PAGE 用泳動バッファです。10 L 分の粉末で、1 L に溶解すれば 10 x バッファとして保存も可能です。

内容

- 10 L 分の粉末 1袋

保存 室温
使用期限 製造より2年

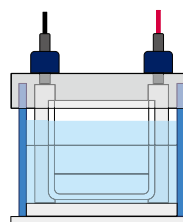

4. SDS-PAGE 用 タンパク質分子量マーカー


WSE-7020 EzProtein Ladder

分子量範囲 5 ~ 245kDa の SDS-PAGE 用ブレステイン分子量マーカーです。25kDa が緑、75kDa がオレンジ、その他のバンドは青に着色されています。

内容

- EzProtein Ladder 250 μL x 2本
- バンド: 13本 (kDa)
- 5/10/15/20/35/45/60/75/100/140/180/245

保存 -20℃
使用期限 製造より1年

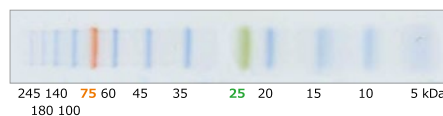

5. タンパク質検出用 CBB 染色試薬

AE-1340 EzStain Aqua

電気泳動後のポリアクリルアミドゲルを浸すだけでタンパク質バンドを検出できる調製済み CBB 染色試薬です。酢酸・アルコールを含まない処方です。

内容

- EzStain Aqua (Ready to use) 1 L


保存 室温
使用期限 製造より1年



Native PAGE スターターセット

タンパク質を非変性状態でポリアクリルアミドゲル電気泳動を行い、活性染色などで分析する Native PAGE には専用の試薬が必要です。

電気泳動メーカーアトーからリリースしている信頼の電気泳動用試薬シリーズから、Native PAGE に最適な試薬 5 種類をセットにして **期間限定 50%オフ** で提供いたします。

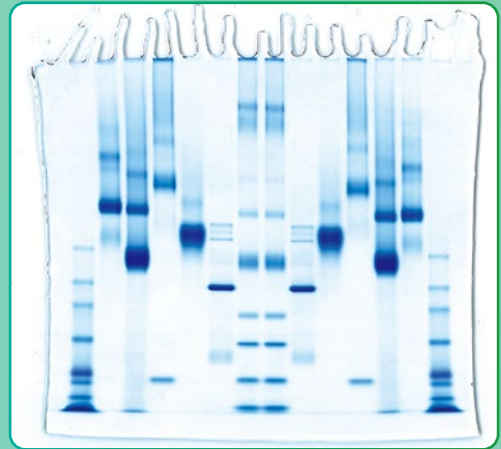

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2332312	Native PAGE スターターセット	49,000 円	98,000 円
構成	2332319 WSE-7424 EzProteoLysis Native	20,800 円	輸送：冷凍
	2332317 WSE-7011 EzApply Native	9,800 円	輸送：常温
	2332344 WSE-7016 EzStandard Native	37,800 円	輸送：冷凍
	2332313 WSE-7056 EzRun ClearNative	16,800 円	輸送：常温
	2332315 WSE-7057 EzRun BlueNative	12,800 円	輸送：常温

50% OFF

スターターセット構成品の輸送温度の違いにより、別便での発送となります。

スターターセットと同時購入でオススメ製品が特別価格購入可能！

オススメ同時購入特典製品


ミニスラブ電気泳動槽

AE-6530M/MW/P

ラピダスミニスラブシリーズ

同時購入価格 30,000 円～

(通常価格 52,800 円～)

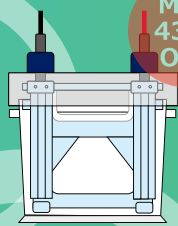

Max
43%
OFF


電源搭載型電気泳動装置

WSE-1150M/MW/P

パジェラン Ace シリーズ

同時購入価格 89,600 円～

(通常価格 128,000 円～)

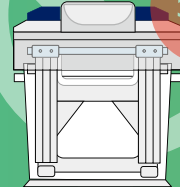

Max
30%
OFF

電気泳動用電源装置

AE-8135

マイパワー II 300

同時購入価格 64,960 円

(通常価格 92,800 円～)



30%
OFF


電気泳動用電源装置

WSE-3100

PowerStation Ghibli I

同時購入価格 210,800 円

(通常価格 248,000 円～)

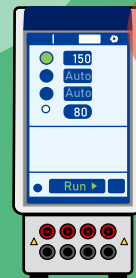

15%
OFF

同時購入特典製品の詳細は P07 ~ をご参照ください。

50% OFF

< Native PAGE スターターセット構成用品 >

1. Native PAGE 用タンパク質抽出キット

WSE-7424 EzProteoLysis Native

動植物細胞や組織に添加するだけで、活性を損なうことなく簡単にタンパク質が抽出できます。Protease inhibitor と Phosphatase inhibitor が添付されています。

キット内容

- ① EzProteoLysis Native 30 mL
- ② Protease inhibitor (100x) 0.3 mL
- ③ Phosphatase inhibitor (100x) 0.3 mL

保存 ① 4℃ / ②③ -20℃
使用期限 製造より1年



2. Native PAGE 用泳動サンプル調製キット

WSE-7011 EzApply Native

タンパク質抽出液に 1/10 容量添加します。HR-CN-PAGE や BN-PAGE など、様々な Native PAGE に使用可能です。

キット内容

EzApply Native 40 mL (10x 濃度)

保存 4℃
使用期限 製造より1年



3. Native PAGE 用タンパク質分子量マーカー

WSE-7016 EzStandard Native

20 ~ 1,236kDa の広範囲の分子量域をカバーする、様々な Native PAGE で使用できる分子量スタンダードです。

内容

EzStandard Native 100 μL × 5 本
バンド : 9 本 (kDa)
20/45/66/146/350/480/720/1,048/1,236

保存 -20℃
使用期限 製造より1年



4. Native PAGE 用 ClearNative 泳動バッファー

WSE-7056 EzRun ClearNative

Tris-Glycine 系ポリアクリルアミドゲルで利用できる High-Resolution-Clear-Native PAGE 用の泳動バッファーです。

内容

陽極用泳動バッファー (5x) 500 mL
陰極用泳動バッファー (5x) 500 mL

保存 室温
使用期限 製造より1年



5. Native PAGE 用 BlueNative 泳動バッファー

WSE-7057 EzRun BlueNative

Tris-Glycine 系ポリアクリルアミドゲルで利用できる Blue-Native PAGE 用の泳動バッファーです。サンプルアブライ後に陰極用 CBB 添加溶液を加えて泳動します。

内容

泳動バッファー (10x) 500 mL
陰極用 CBB 添加溶液 (100x) 25 mL


保存 室温
使用期限 製造より1年



ウエスタンブロットスターターセット

タンパク質の特異検出であるウエスタンブロットティングでは、ブロットティング、ブロッキング、抗体反応、洗浄、検出など多くのステップがあります。

電気泳動メーカーアトーからリリースしている信頼の電気泳動用試薬シリーズから、ウエスタンブロットティングに最適な試薬5種類をセットにして**期間限定 50% オフ**で提供いたします。

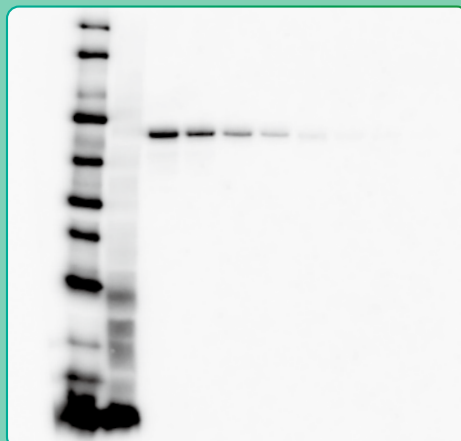

商品コード	製品名	キャンペーン価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2332302	ウエスタンブロットスターターセット 1	29,000 円	58,000 円
構成	2322443 WSE-4057 QBlot Kit M	19,800 円	輸送：常温※
	2332615 AE-1475 EzBlock Chemi	12,800 円	輸送：冷蔵
	2332625 WSE-7230 EzTBS	7,800 円	輸送：常温※
	2332626 WSE-7235 EzTween	3,800 円	輸送：冷蔵
	2332632 WSE-7110 EzWestLumiOne(250mL)	13,800 円	輸送：冷蔵
2332303	ウエスタンブロットスターターセット 2	25,500 円	51,000 円
構成	2332590 AE-1465 EzFastBlot	12,800 円	輸送：常温
	2332615 AE-1475 EzBlock Chemi	12,800 円	輸送：冷蔵
	2332625 WSE-7230 EzTBS	7,800 円	輸送：常温※
	2332626 WSE-7235 EzTween	3,800 円	輸送：冷蔵
	2332632 WSE-7110 EzWestLumiOne(250mL)	13,800 円	輸送：冷蔵

50% OFF

50% OFF


スターターセット構成品の輸送温度の違いにより、別便での発送となります。※：冷蔵輸送可能です。

オススメ同時購入特典製品

スターターセットと同時購入で
オススメ製品が特別価格購入可能！

ブロットティング装置

WSE-4025
ホライズブロット 2M
同時購入価格 108,800 円
(通常価格 128,000 円～)

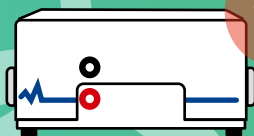

15% OFF

電気泳動用 電源装置


AE-8135
マイパワー II 300
同時購入価格 64,960 円
(通常価格 92,800 円～)



30% OFF

電気泳動用 電源装置

WSE-3100
PowerStation Ghibli I
同時購入価格 210,800 円
(通常価格 248,000 円～)

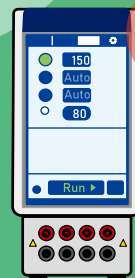

15% OFF

同時購入特典製品の詳細は P07 ~ をご参照ください。

50% OFF

<ウエスタンブロットスターターセット構成品>


1. ブロットングパック (ウエスタンブロットスターターセット1)

WSE-4057 QBlot Kit M

封を切ればすぐに使用できるブロットングパックです。～250kDa、高速ブロットング5～15分が可能です。本試薬はアルコールフリーです。

キット内容

- ① Top Stack : 10パック
 - ② Bottom Stack : 10パック
 - ③ Gel Wash Buffer (5×) : 100mL
- 保存 ①② 4～10℃ ③室温
使用期限 製造より1年

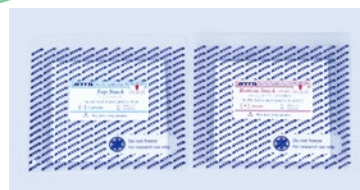

ゲルサイズ : 8.5 × 9cm に対応

1. ブロットング試薬 (ウエスタンブロットスターターセット2)

AE-1465 EzFastBlot

アルコールフリー、高速ブロットング試薬です。分子量～250kDa、10～15分が可能です。

キット内容

- EzFastBlot (10×) : 500mL
保存 室温
使用期限 製造より1年



2. ブロッキング試薬 (ウエスタンブロットスターターセット1/2 共通)

AE-1475 EzBlock Chemi

非タンパク質系ブロッキング試薬です。非タンパク質系なのでさまざまなタンパク質の検出に使用可能です。

キット内容

- EzBlock Chemi (5×) : 500mL
保存 4～10℃
使用期限 製造より2年



3. ウォッシュ試薬 / 4. Tween 溶液 (ウエスタンブロットスターターセット1/2 共通)

WSE-7230 EzTBS/WSE-7235 EzTween

ウォッシュ用TBS溶液、界面活性剤10% Tween 溶液です。

キット内容

- ① EzTBS (10×) : 1L
 - ② EzTween (10%) : 100mL
- 保存 ①室温 ② 4～10℃
使用期限 製造より1年




5. 発光検出試薬 (ウエスタンブロットスターターセット1/2 共通)

AE-7110 EzWestLumi One

HRP用発光検出試薬です。1液タイプですぐに使用可能です。

キット内容

- EzWestLumi One : 250mL
使用量 0.05mL/cm²
保存 4～10℃
使用期限 製造より1年

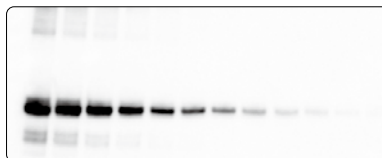

電気泳動槽

ELECTRO

スターターセット
同時購入特典製品

AE-6530P


ラピダス ミニスラブ電気泳動槽

AE-6530M

ラピダス ミニスラブ電気泳動槽

AE-6530MW

ラピダス ミニスラブ電気泳動槽
作製キット付



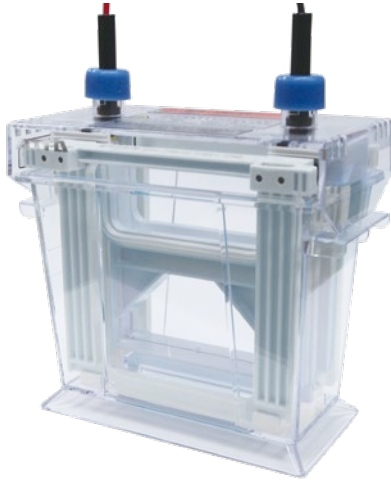


タンパク質や核酸のスラブ型電気泳動槽「ラピダスミニスラブ」シリーズ
スターターセットと同時購入で 35 ~ 43% OFF の特別価格で提供いたします。

PAGEL 用：既製ゲル PAGEL シリーズ用プレートホルダー付

自作ゲル用：自作ゲル用プレートホルダー付

簡単なゲル脱着と全面恒温が特長の電気泳動槽です。

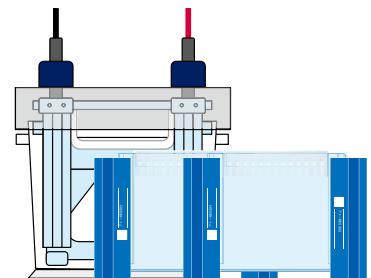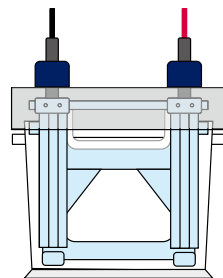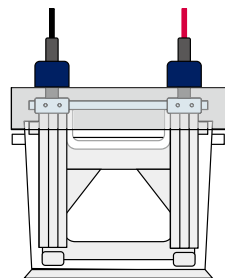

	AE-6530P	AE-6530M	AE-6530MW
使用ゲル	既製ゲルプレート (5mm 厚) サイズ：幅 120mm 高 100mm	自作ゲルプレート (7mm 厚) サイズ：幅 120mm 高 100mm	自作ゲルプレート (7mm 厚) サイズ：幅 120mm 高 100mm
構成	<ul style="list-style-type: none"> AE-6530P 本体 PAEGL 用プレートホルダー ダミープレート DP-5 リード線 	<ul style="list-style-type: none"> AE-6530M 本体 自作ゲル用プレートホルダー ダミープレート DP-7 リード線 	<ul style="list-style-type: none"> AE-6530M 本体 自作ゲル用プレートホルダー ダミープレート DP-7 リード線 AE-6401 ゲル作製キット プレートセット：2組 シールガasket：2枚 12 検体コウム：2枚 マグネクリップミニ：4個

商品コード	製品名	同時購入特典価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2321905	AE-6530P ラピダス ミニスラブ電気泳動槽 (PAGEL 仕様)	30,000 円	52,800 円
2321900	AE-6530M ラピダス ミニスラブ電気泳動槽 (自作ゲル仕様)	30,000 円	52,800 円
2321915	AE-6530MW ラピダス ミニスラブ電気泳動装置 (作製キット付)	53,040 円	81,600 円

43% OFF

43% OFF

35% OFF

PHORESIS

スターターセット
同時購入特典製品

WSE-1150P

パジェラン Ace (PAGEL 仕様)

WSE-1150M

パジェラン Ace (自作ゲル仕様)

WSE-1150MW

パジェラン Ace (自作ゲル仕様)
作製キット付






電源と蓋が一体化になった電気泳動槽「パジェラン Ace」シリーズ
スターターセットと同時購入で 28 ~ 30% OFF の特別価格で提供いたします。

PAGEL 用 : 既製ゲル PAGEL シリーズ用プレートホルダー付

自作ゲル用 : 自作ゲル用プレートホルダー付

高速電気泳動に対応し、ゲル脱着が簡単、全面恒温可能な電気泳動槽です。

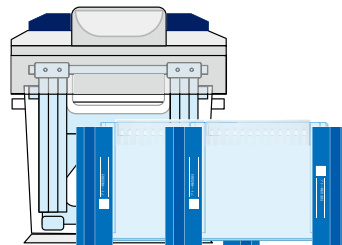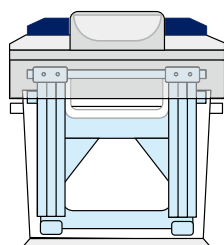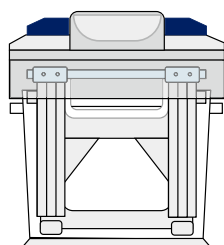

	WSE-1150P	WSE-1150M	WSE-1150MW
使用ゲル	既製ゲルプレート (5mm 厚) サイズ: 幅 120mm 高 100mm	自作ゲルプレート (7mm 厚) サイズ: 幅 120mm 高 100mm	自作ゲルプレート (7mm 厚) サイズ: 幅 120mm 高 100mm
構成	<ul style="list-style-type: none"> WSE-1150P 本体 泳動用電源 PAEGL 用プレートホルダー ダミープレート DP-5 	<ul style="list-style-type: none"> WSE-1150M 本体 泳動用電源 自作ゲル用プレートホルダー ダミープレート DP-7 	<ul style="list-style-type: none"> WSE-1150M 本体 泳動用電源 自作ゲル用プレートホルダー ダミープレート DP-7 AE-6401 ゲル作製キット プレートセット: 2 組 シールガスカート: 2 枚 12 検体コウム: 2 枚 マグネクリップミニ: 4 個

商品コード	製品名	同時購入特典価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2321670	WSE-1150P パジェラン Ace (PAGEL 仕様)	89,600 円	128,000 円
2321650	WSE-1150M パジェラン Ace (自作ゲル仕様)	89,600 円	128,000 円
2321651	WSE-1150MW パジェラン Ace (作製キット付)	112,640 円	156,800 円

30%
OFF

30%
OFF

28%
OFF

電源装置 POWER SUPPLY

電源装置

スターターセット
同時購入特典製品

AE-8135 マイパワー II 300

0.74kg

~ 400mA

~ 300V



マイパワー II 300 : 400mA まで出力可能なのでセミドライプロットティング、電気泳動 (SDS-PAGE など) に利用可能です。
幅 74mm、奥行 170mm、高さ 170mm のコンパクトサイズと 0.74kg の軽量ボディ、ポップなデザインが特長です。

WSE-3100 PowerStation Ghibli I

タッチパネル

~ 3000mA

~ 500V



PowerStation Ghibli I : 3000mA まで出力可能で、高速セミドライプロットティング、電気泳動 (SDS-PAGE など) に利用可能です。また等電点電気泳動にも対応します。プリセットの Easy モードで簡単に電気泳動をスタート可能です。大型のタッチパネルは操作性が高く、各種情報を表示します。

スターターセット同時購入特典製品

小型・軽量でありながら、幅広い用途に使用可能な「マイパワー II 300」と、タッチパネル操作で高性能なデジタル電源装置「PowerStation Ghibli I」をスターターセットと同時購入で 15 ~ 30% OFF の特別価格にて提供いたします。

	AE-8135	WSE-3100
出力設定	電圧 : 1 ~ 300V 電流 : 1 ~ 400mA (Max50W)	電圧 : 3 ~ 500V 電流 : 10 ~ 3,000mA 電力 : 1 ~ 200W
主な用途	<ul style="list-style-type: none"> ・SDS-PAGE ・プロットティング ・アガロースゲル電気泳動 	<ul style="list-style-type: none"> ・高速電気泳動 ・SDS-PAGE/Native-PAGE ・アガロースゲル電気泳動 ・等電点電気泳動 (IEF) ・高速プロットティング ・セミドライプロットティング ・ウェットプロットティング

商品コード	製品名	同時購入特典価格 (税抜)	通常価格 (税抜)
2311175	AE-8135 マイパワー II 300	64,960 円	92,800 円
2311130	WSE-3100 PowerStation Ghibli I	210,800 円	248,000 円

30%
OFF

15%
OFF

WESTERN BLOT

ブロッキング装置

スターターセット
同時購入特典製品

WSE-4025 ホライズブロット 2M



ミニゲル2枚を同時に転写可能なセミドライブロッキング装置「ホライズブロット 2M」をスターターセットと同時購入で15% OFFの特別価格にて提供いたします。

ホライズブロット 2M：205 × 100mmの白金チタンとステンレスの電極板を備えたセミブロッキング装置です。セミドライブロッキングは発熱が少なくタンパク質の変性を抑えて転写が可能です。アトーではセミドライブロッキングに適した転写試薬をラインナップ（高速用、高分子用など）しています。

用途

- ・セミドライブロッキング

特長

- ・ミニゲル1～2枚用
- ・ブロッキングローラー付属
- 必要な電源装置（最大電流値より）
- 標準：～400mA（AE-8135など）
- 高速：～1A（WSE-3100/3500など）

ろ紙・膜・ブロッキングキット（オプション）

- ・CB-06A/CB-09A（0.9mm厚）
- ・クリアブロット・P+膜：WSE-4050/4051/4054
- ・クリアブロット・P膜：WSE-4060/4061/4064
- ・QBlot kit：全シリーズ
- ※オプションは1例です。

製品名	WSE-4025 HorizBlot 2M ホライズブロット 2M
電極板	+白金チタン -ステンレス
最大転写サイズ	205 × 100mm
本体寸法 (WDH)	246 × 186 × 114mm
質量	1.8kg

	WSE-4025
転写枚数	ミニゲル：2枚 コンパクトゲル：3枚
構成	・WSE-4025 本体 ・リード線 ・ブロッキングローラー

商品コード	製品名	同時購入特典価格（税抜）	通常価格（税抜）
2322466	WSE-4025 ホライズブロット 2M	108,800 円	128,000 円

15%
OFF

セット以外のブロッキング膜、ろ紙は別途購入ください。

ご用命は下記販売店までお問合せください。



アトー株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器
開発/生産/販売/サービス

■東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2
■大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1
若杉センタービル別館5F
■技術開発センター 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6
◆メンテナンスサービス

TEL03-5827-4861 (代表) FAX03-5827-6647
TEL06-6136-1421 (代表) FAX06-6356-3625
TEL03-5818-7560 (代表) FAX03-5818-7563
TEL03-5818-7567 (代表) FAX03-5818-7563

URL:<https://www.atto.co.jp/>

お問合せ
WEB会員登録の上、お問い合わせ
フォームをご利用ください。

